



NORA BODE
OXYJET GO

Геро Боде

Технический директор компании
Nora Bode Kosmetik Germany



Киев,
УКРАИНА
ноябрь 2019

2019: год перемен

Новый рубеж для компании
NORA BODE Kosmetik

Инновации на мировом рынке
красоты


Презентация уникальной системы
домашнего ухода



2019: год перемен

NORA BODE

OXYJET GO 

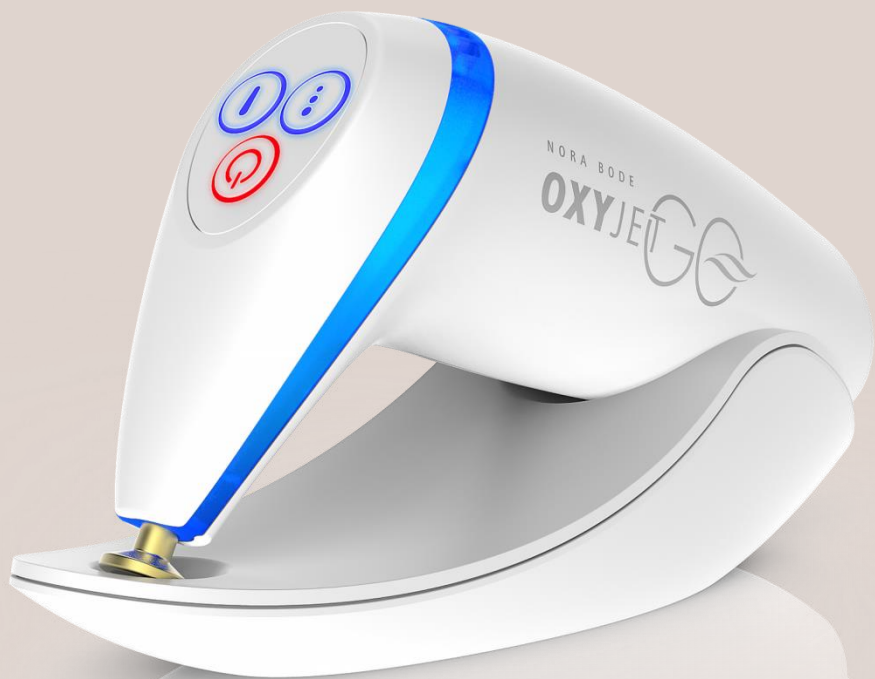

2019: год перемен

Базис:

ОХУJET

Оригинальная запатентованная система
безулыльных инъекций кислорода – сделано в
Германии



2019: год перемен

Результат:

Неинвазивные инъекции под импульсным давлением кислорода – теперь доступны для безопасного применения в домашних условиях или в путешествии!





NORA BODE

OXYJET GO

Запатентованная технология
импульсного давления для
домашнего применения

- Модифицированная процедура OXYjet для безопасного применения дома или в поездке
- Идеальное сочетание профессиональной процедуры и последующего домашнего ухода – для стойких долгосрочных результатов
- Непосредственно видимое действие: мягкое, эффективное и безопасное





NORA BODE

OXYJET GO

Технология

- Сыворотки **OXYJET 1** и **OXYJET 2** вводятся в глубокие слои кожи
- В результате чрезвычайно ускоренного проникновения препаратов в коже образуется запас активных компонентов
- Биоматрикс (внеклеточное пространство) наполняется активными ингредиентами
- Абсолютно без боли: процедура бережная, эффективная и безопасная

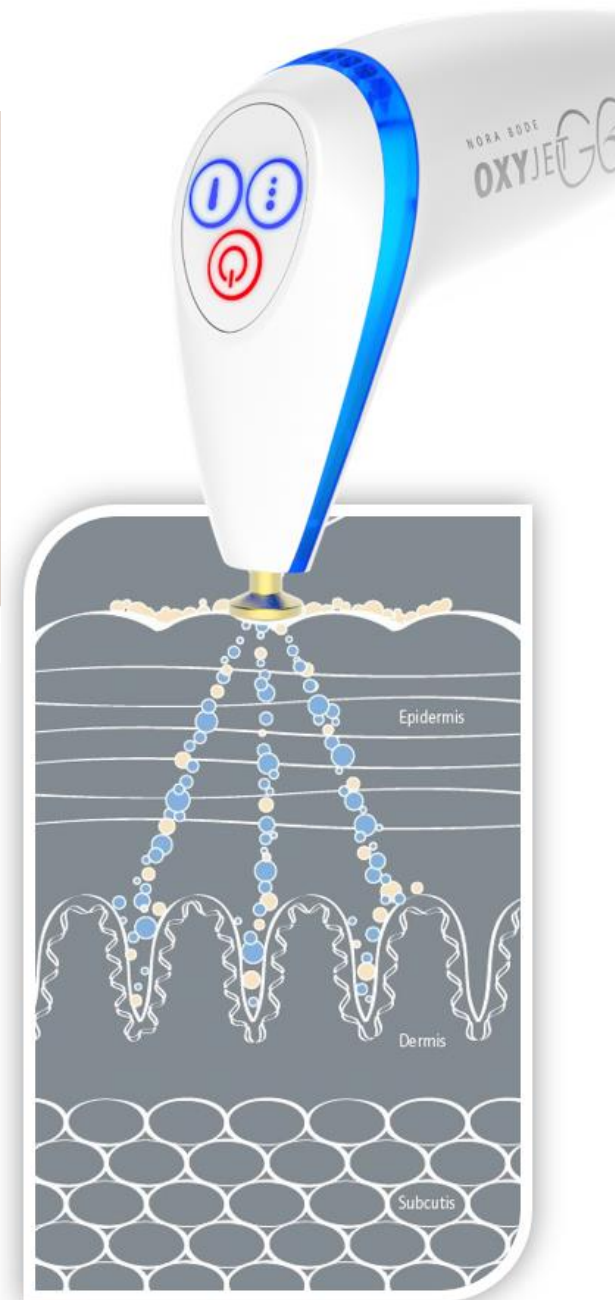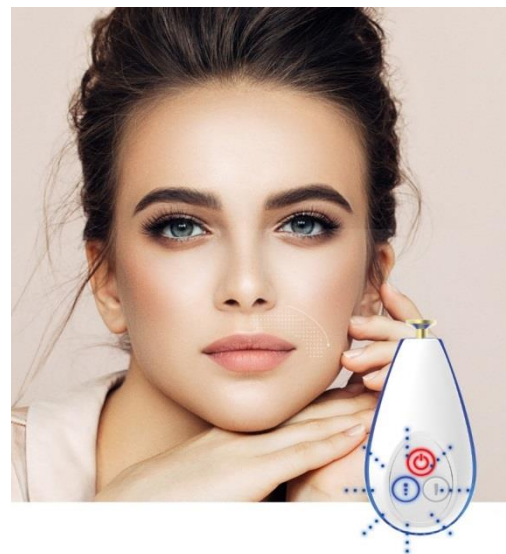




NORA BODE

OXYJET GO

Что происходит с кожей

Главный активный ингредиент:

ПЕРФТОРДЕКАЛИН + кислород O₂ (OxyForce™)

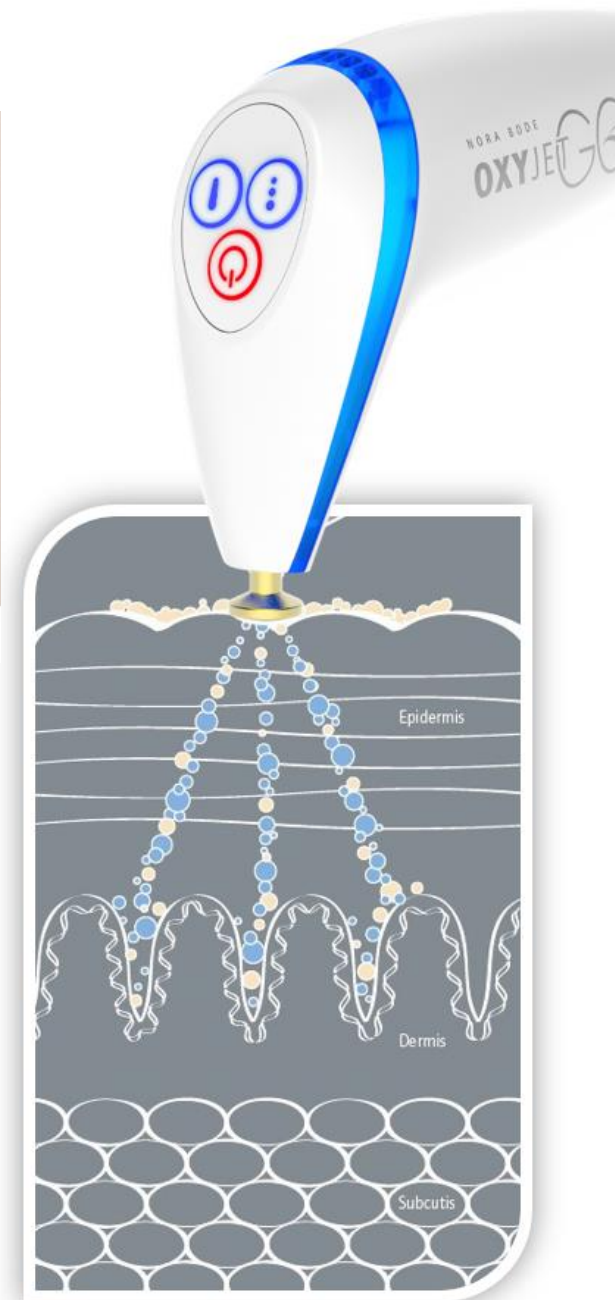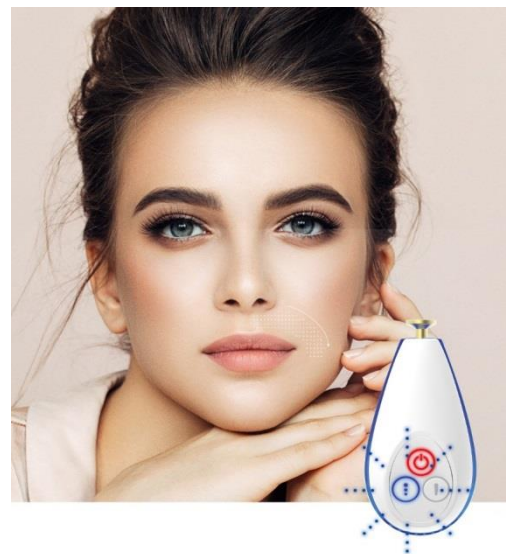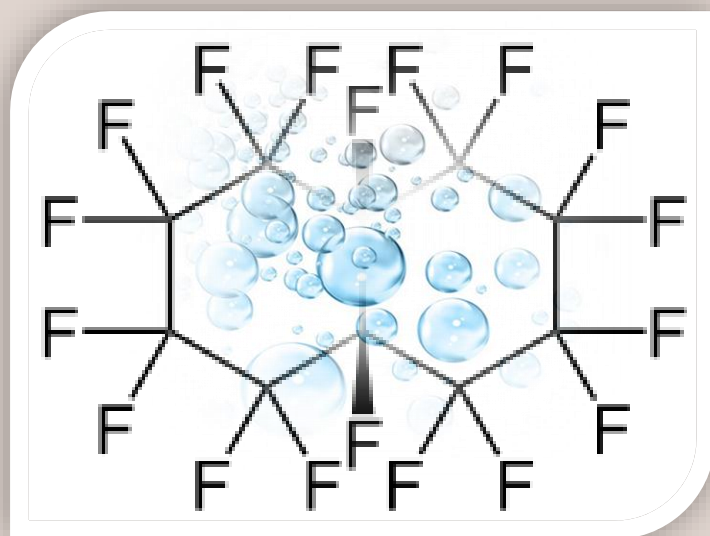

NORA BODE


OXYJET GO

Что происходит с кожей

ПЕРФТОРДЕКАЛИН + кислород O₂ (OxyForce™)

Микроинкапсулированный кислород активно поступает в глубокие слои кожи благодаря действию давления OXYJET GO

- ✓ Повышает снабжение клеток кожи молекулярным кислородом
- ✓ Положительное влияние на уровни энергии и скорость пролиферации фибробластов
- ✓ Поддерживает естественное производство коллагена

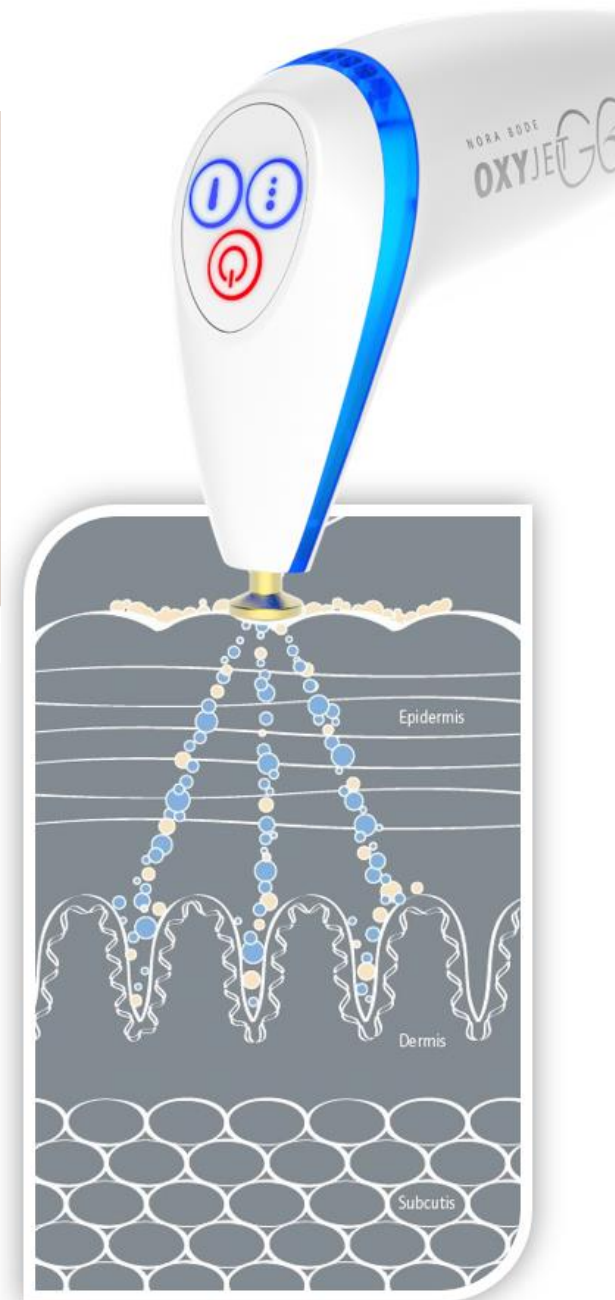

NORA BODE

OXYJET GO

Что происходит с кожей

Сыворотки OXYJET 1 и OXYJET 2 содержат активные ингредиенты, которые разглаживают текстуру и регулируют пигментацию кожи:

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

MEIRITAGE™

АЦЕТИЛ ТЕТРАПЕПТИД-5

СОММЕРНОРА МУКУЛ

ГЛИКОСФИНГОЛИПИДЫ

ПУЛЛУЛАН

СКВАЛАН

АТФ





NORA BODE

ОХУЈЕТ GO

Для естественной красоты кожи

- ✓ Заметно разглаживает линии и морщины
- ✓ Молекулярный кислород и активные ингредиенты оживляют кожу
- ✓ Придает объем и эластичность
- ✓ Улучшает кровообращение в коже
- ✓ Интенсивно увлажняет и выравнивает кожу
- ✓ Устраняет неравномерную пигментацию





NORA BODE

OXYJET GO

Подготовка – быстро и просто!




В наборе уже есть все
необходимое!



NORA BODE

OXYJET GO

Подготовка – быстро и просто!

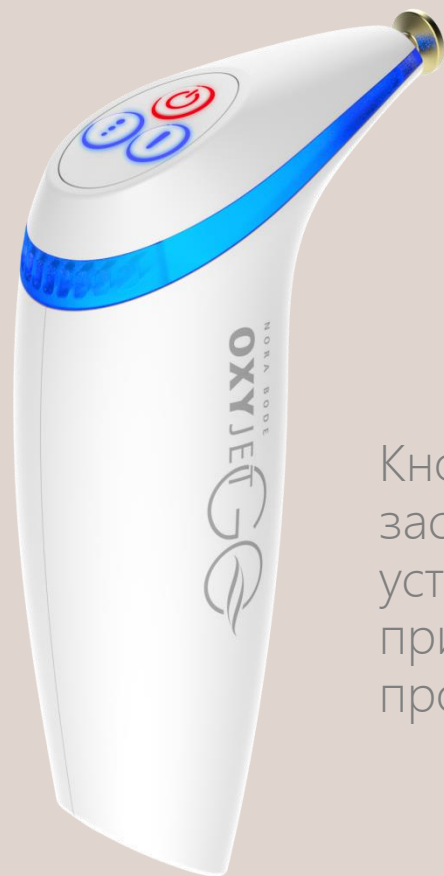

Кнопки и LED-кольцо
засветились -
устройство уже готово к
применению, можно начинать
процедуру!





NORA BODE

OXYJET GO

Функции: выберите свой режим



Функция «Импульс»



Функция «Поток»





NORA BODE

OXYJET GO

Индикатор состояния



LED-кольцо светится
синим:
готов к применению



LED-кольцо светится
красным: действия
отключены





NORA BODE

OXYJET GO

MPS – система многофакторной защиты



Встроенная система многофакторной защиты обеспечивает максимальную безопасность устройства, в том числе:

- Контроль времени (максимальное время активной сессии: 20 минут)
- Контроль температуры
- Визуальные и звуковые сигналы





NORA BODE

OXYJET GO

Технические характеристики

- ✓ Режим «Импульс»: импульсное давление 1,7 бар
- ✓ Режим «Поток» для лимфодренажа
- ✓ Постоянное питание: нет батареи – не нужно заряжать
- ✓ Встроенная система защиты контролирует все функции устройства
- ✓ Визуальные и звуковые индикаторы
- ✓ 5 сменных штепсельных вилок для использования в различных регионах
- ✓ Интуитивное управление и подробная инструкция



NORA BODE

ОХУЖЕТ GO


Процедура

- Разработано для ухода за кожей в домашних условиях
- Лоб, щеки, вокруг глаз и рта
- 3 раза в неделю на протяжении первых 4 недель, затем 1 раз в неделю для поддержания и улучшения результатов

Всего после одной процедуры:



ДО

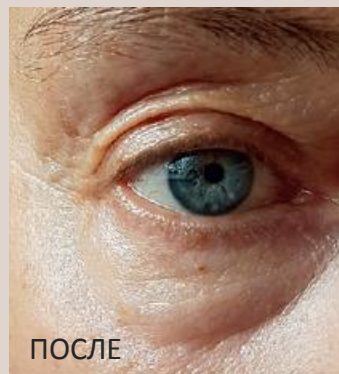

ПОСЛЕ



NORA BODE

ОХУЈЕТ GO

Пошаговая инструкция

1. Нанести сыворотку ОХУЈЕТ 1 на все лицо
2. Нанести сыворотку ОХУЈЕТ 2 на области-мишени (например, зона под глазами)
3. В режиме «Импульс» обработать область-мишень, в направлении от внутренних уголков глаз к вискам
4. Один участок обрабатывать 3-5 импульсами давления
5. Использовать режим «Поток» для лимфодренажа вокруг глаз, если присутствует одутловатость

1



2




3



NORA BODE

ОХУЈЕТ GO

Что происходит с кожей

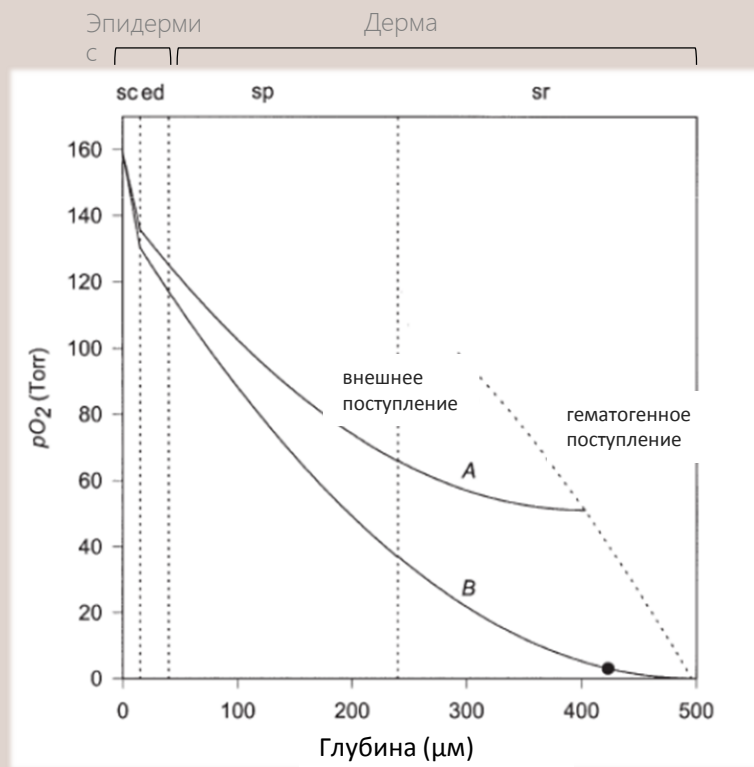

pO_2 : Парциальное давление кислорода в мм рт.ст.

A: с OxyForce™

B: без OxyForce™

Важно:
Верхние слои кожи до 0,4 мм
глубины питаются
исключительно внешним
кислородом.

SC: роговой слой
ED: эпидермис
SP: сосочковый слой
SR: сетчатый слой




NORA BODE

ОХУЈЕТ GO

Что происходит с кожей

Измерение клеточной пролиферации дермальных фибробластов человека в условиях in vitro

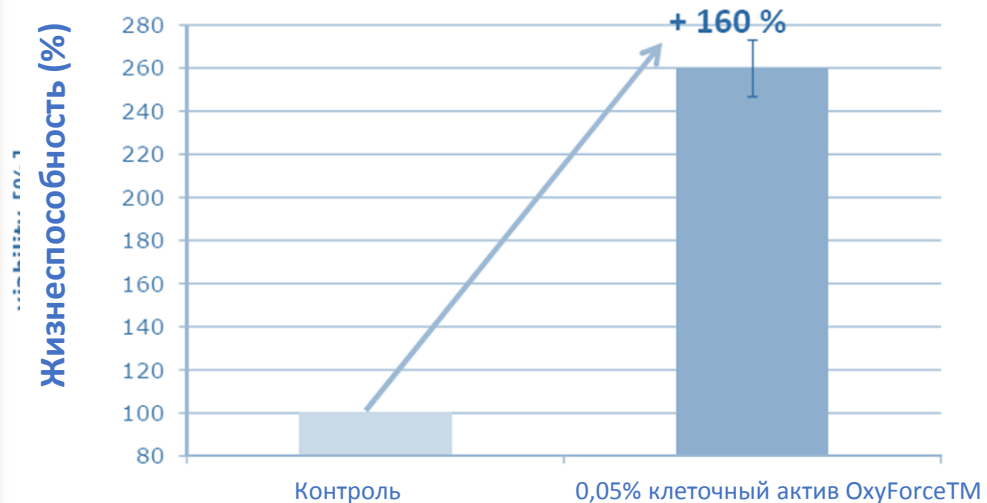

Клеточная пролиферация человеческих фибробластов значительно возросла.

ФИБРОБЛАСТ

Волокна коллагена


Энзимы

Эластин

Внеклеточный матрикс

Фактор роста

Гиалуроновая кислота

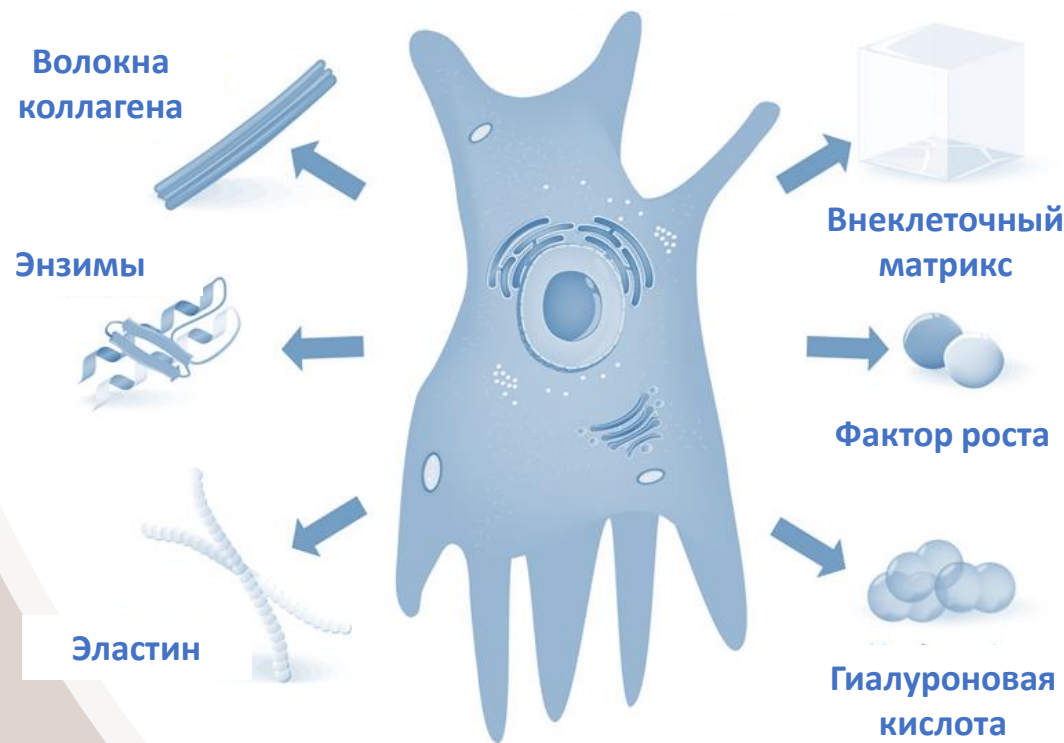




NORA BODE

ОХУЈЕТ GO

Что происходит с кожей

Измерение количества коллагена в условиях in vitro

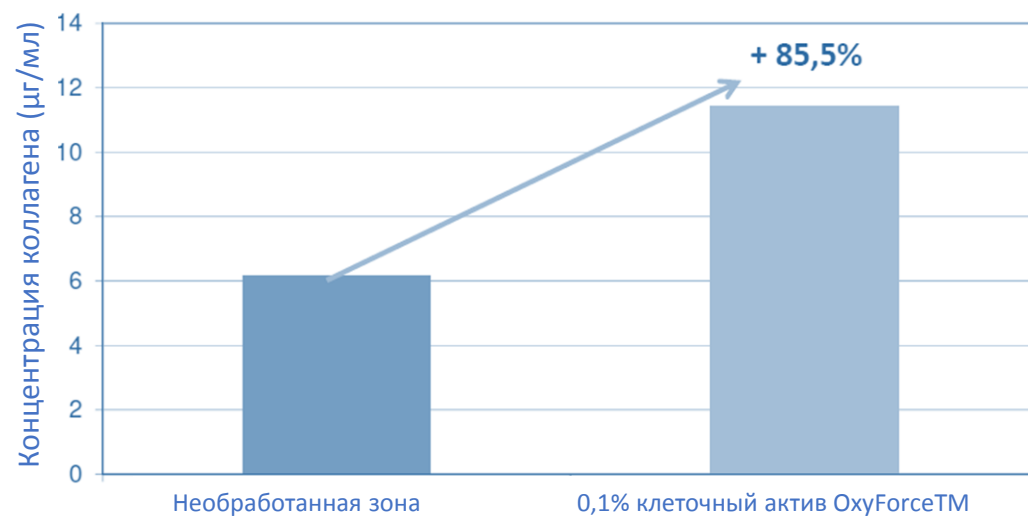


Выработка коллагена значительно возросла.



NORA BODE


ОХУЈЕТ GO

Что происходит с кожей

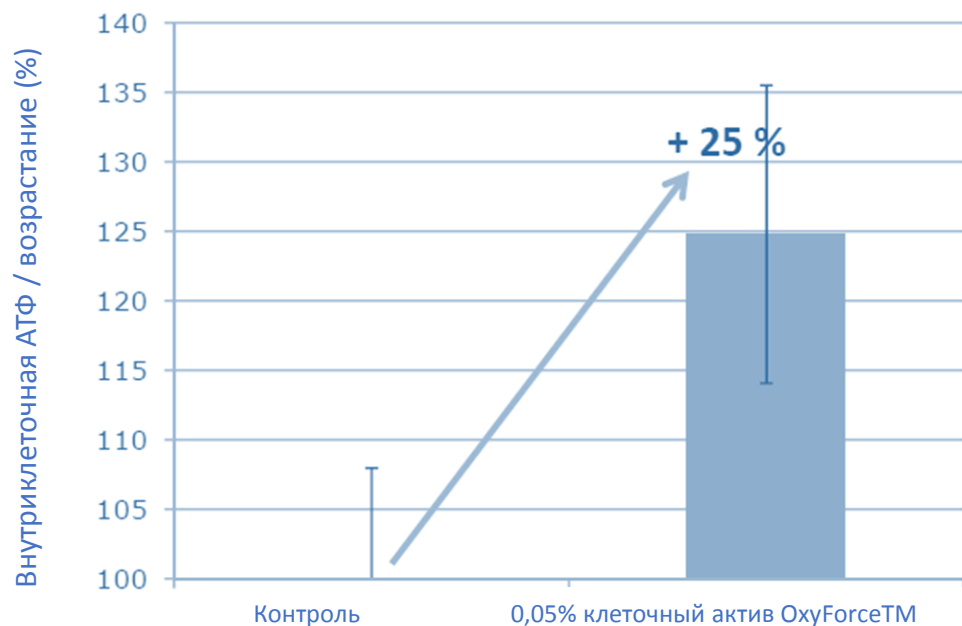

Выработка АТФ в митохондриях значительно возросла.

КЛЕТОЧНОЕ ДЫХАНИЕ

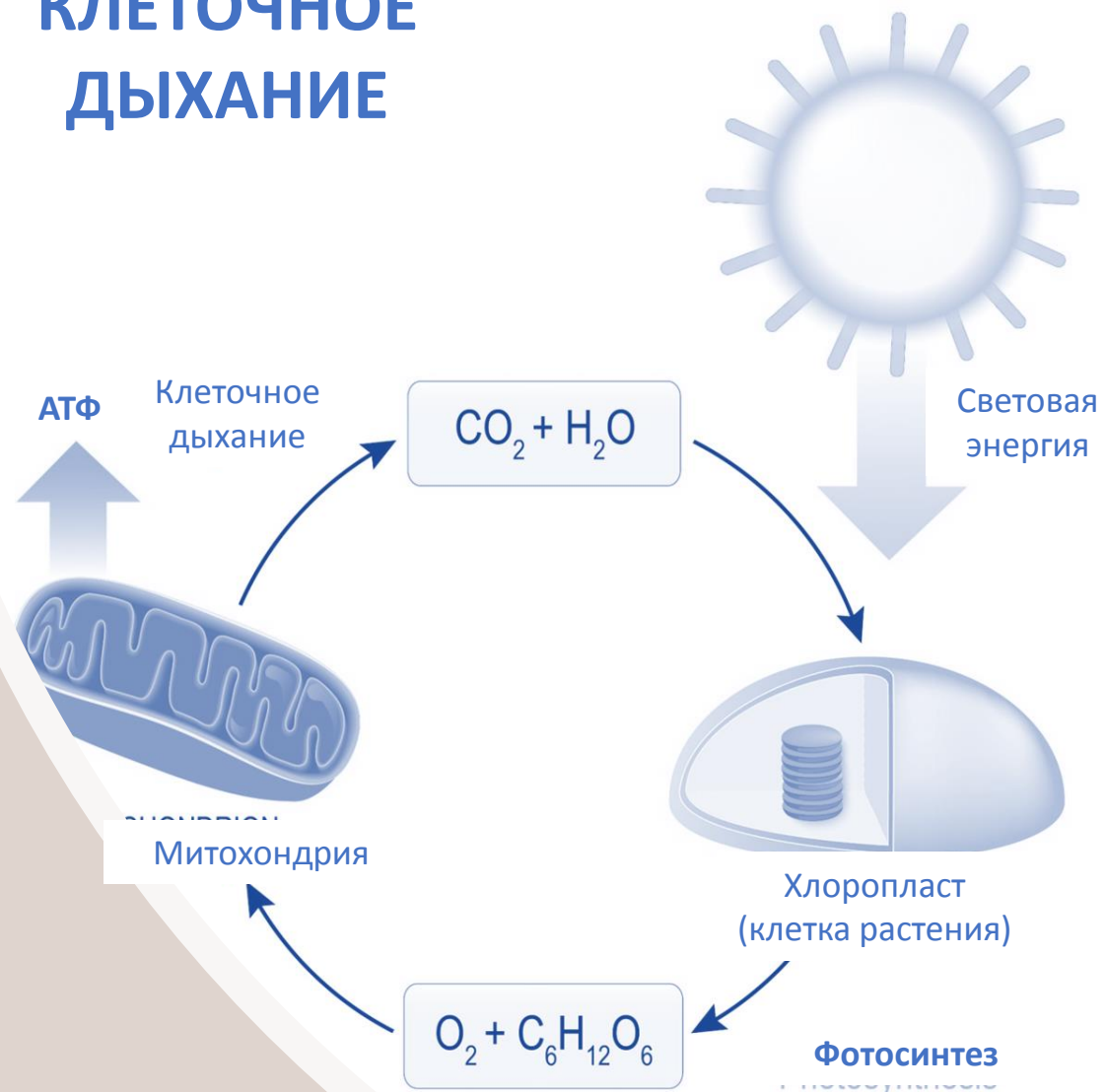







NORA BODE

ОХУЈЕТ GO

Что происходит с кожей

Глубина морщин заметно уменьшается уже после первой процедуры:

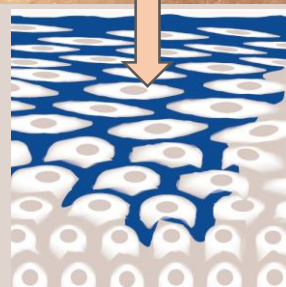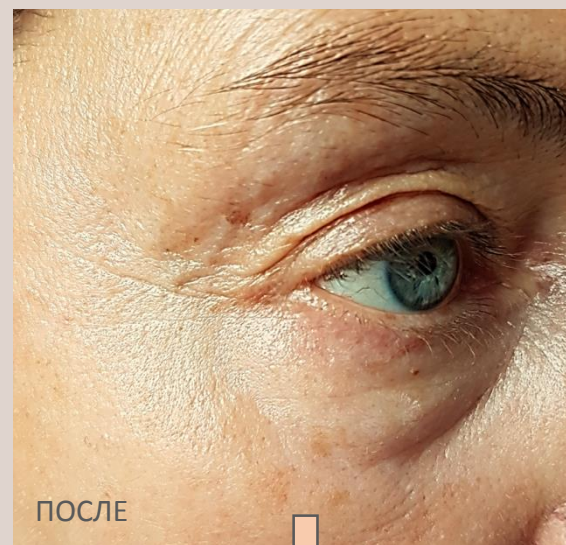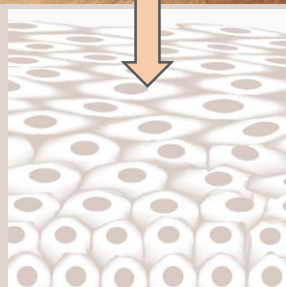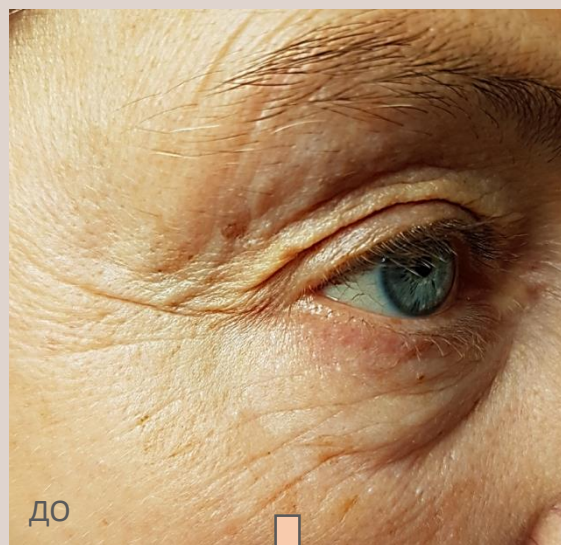

NORA BODE

OXYJET GO

Научно доказанная эффективность

Институт DERMATEST (Мюнстер, Германия) подтвердил эффективность системы OXYJET GO:

- ✓ Система OXYJET GO доставляет активные ингредиенты глубоко в слои эпидермиса и дермы кожи человека
- ✓ Через 10 минут эпидермис доверху наполнен применяемым продуктом, и начинается его проникновение в дерму
- ✓ Образуется запас ингредиентов – увеличивается объем кожи
- ✓ После проведения процедуры кожа цела, невредима и в безупречном виде. Никаких следов вмешательства и повреждений!



NORA BODE

ОХУЈЕТ GO

Кто ищет такую вещь?

- ✓ И женщины, и мужчины
- ✓ Молодежь, желающая предотвратить признаки старения
- ✓ Люди всех возрастов, которые борются с возрастными изменениями

РАЗ. ДВА. ТРИ. СТАРЕНИЕ СОТРИ!






NORA BODE

ОХУЈЕТ GO

"Маст-хэв" для естественной красоты

- ✓ Уникальная неинвазивная технология
- ✓ Протестировано и одобрено институтом DERMATEST, Германия
- ✓ Уменьшает и предотвращает признаки старения:
 - > линии и морщины
 - > нарушения пигментации
 - > потерю эластичности и живости
 - > потерю объема и дряблость кожи
- ✓ Самое высокое качество
- ✓ Сделано в Германии

 спроектировано
 разработано
 испытано
 изготовлено

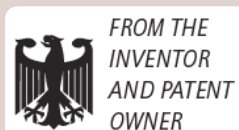


FROM THE
INVENTOR
AND PATENT
OWNER

От изобретателя и
владельца патента



SCIENTIFICALLY
PROVEN
EFFICIENCY

Научно доказанная
эффективность

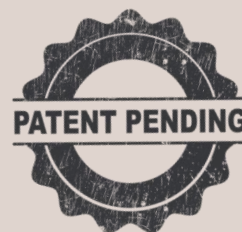

Патент заявлен



